

Poczucie bezpieczeństwa – System Higieny Dürr Dental

4 obszary, 4 kolory – skuteczne, logiczne, bezpieczne



Higiena systemów
ssących i obszarów
specjalnych

08



Higiena powierzchni
FD

14



Higiena rąk
HD

22



Higiena instrumentów
ID

26



Serwis i kontakt

34

04

4 kolory, 4 obszary

06

System Higieny Dürr Dental

08

Higiena systemów ssących
i obszarów specjalnych

14

Higiena powierzchni FD

22

Higiena rąk HD

26

Higiena instrumentów ID

32

Cykl higieniczny

34


Serwis i kontakt

WE LIKE IT!



4 kolory, 4 obszary

Ochrona przed zakażeniami stanowi najwyższy cel w gabinetach stomatologicznych. Kompletna higiena w gabinecie stomatologicznym obejmuje przygotowywanie instrumentów, rygorystyczną dezynfekcję dłoni i powierzchni, jak również kompleksowe czyszczenie i dezynfekcję dentystycznych instalacji ssących. Aby zapewnić użytkownikom wyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych preparatów, produkty Dürr Dental są oznaczone specjalnym czterokolorowym systemem. W jego ramach wszystkie preparaty są przejrzystie przyporządkowane do konkretnych obszarów zastosowania:

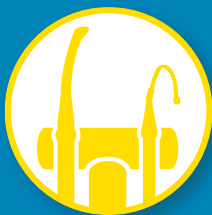

Systemy ssące i obszary specjalne

Żółta linia produktów oferuje szerokie spektrum zastosowań. Między innymi połączenie produktów Orotol plus oraz MD 555 cleaner zapewnia wysoce wydajne czyszczenie i dezynfekcję systemów ssących. Dostępne są też odpowiednie produkty higieny Dürr Dental do wycisków i prac protetycznych.



Powierzchnie

Zielona linia produktów obejmuje wysoce skuteczne i łatwe w użyciu środki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia medycznego. Koncentraty, gotowe do użyciu roztwory oraz szeroki wybór chusteczek ułatwiają personelowi gabinetu codzienne utrzymywanie higieny.



Dłonie

Różowa linia produktów zapewnia niezawodną i delikatną ochronę. Dokładne czyszczenie i dezynfekcja rąk to konieczność. To właśnie ręce są najpowszechniejszym sposobem przenoszenia chorób. Preparaty HD są przetestowane dermatologicznie, skuteczne, a jednocześnie przyjazne dla skóry.



Instrumenty

Niebieska linia produktów umożliwia ręczne czyszczenie i dezynfekcję instrumentów w sposób bezpieczny oraz łagodny dla materiałów. Dodatkowe urządzenia i akcesoria uzupełniają system w każdym aspekcie higieny.



FD 322 lub FD 333
Szybka dezynfekcja



FD 350
Szybka dezynfekcja

FD 333
top wipes

Nasze zalecenia do gabinetu stomatologicznego

HD 420 plus
Dezynfekcja rąk

HD 435
Emulsja
do mycia

FD 366 sensitive
Dezynfekcja
delikatnych
powierzchni

FD 360
Czyszczenie
i pielęgnacja
sztucznej skóry

FD 366 sensitive wipes
lub sensitive top wipes

MD 555 cleaner
Specjalny preparat
czyszczący do
systemów ssących

Orotol plus
Dezynfekcja
systemu
ssącego

MD 550
Środek do czyszczenia
spluwaczek


ID 220
Dezynfekcja wiertel

ID 212 lub ID 213
Dezynfekcja instrumentów



Najlepiej w systemie

Najlepiej jest, gdy można zdać się na system. Już w 1965 roku firma Dürr Dental opracowała Orotol – pierwszy środek do dezynfekcji systemów ssących. Był to pierwszy krok na drodze do stałego rozwoju naszych kompetencji w dziedzinie higieny. Obecnie stomatolodzy z całego świata pokładają zaufanie w systemie higieny firmy Dürr Dental, która kompleksowo chroni ich gabinety. Najwyższej jakości osiągniętej dzięki wieloletniemu doświadczeniu stale towarzyszą innowacje tworzone z myślą o potrzebach gabinetów.

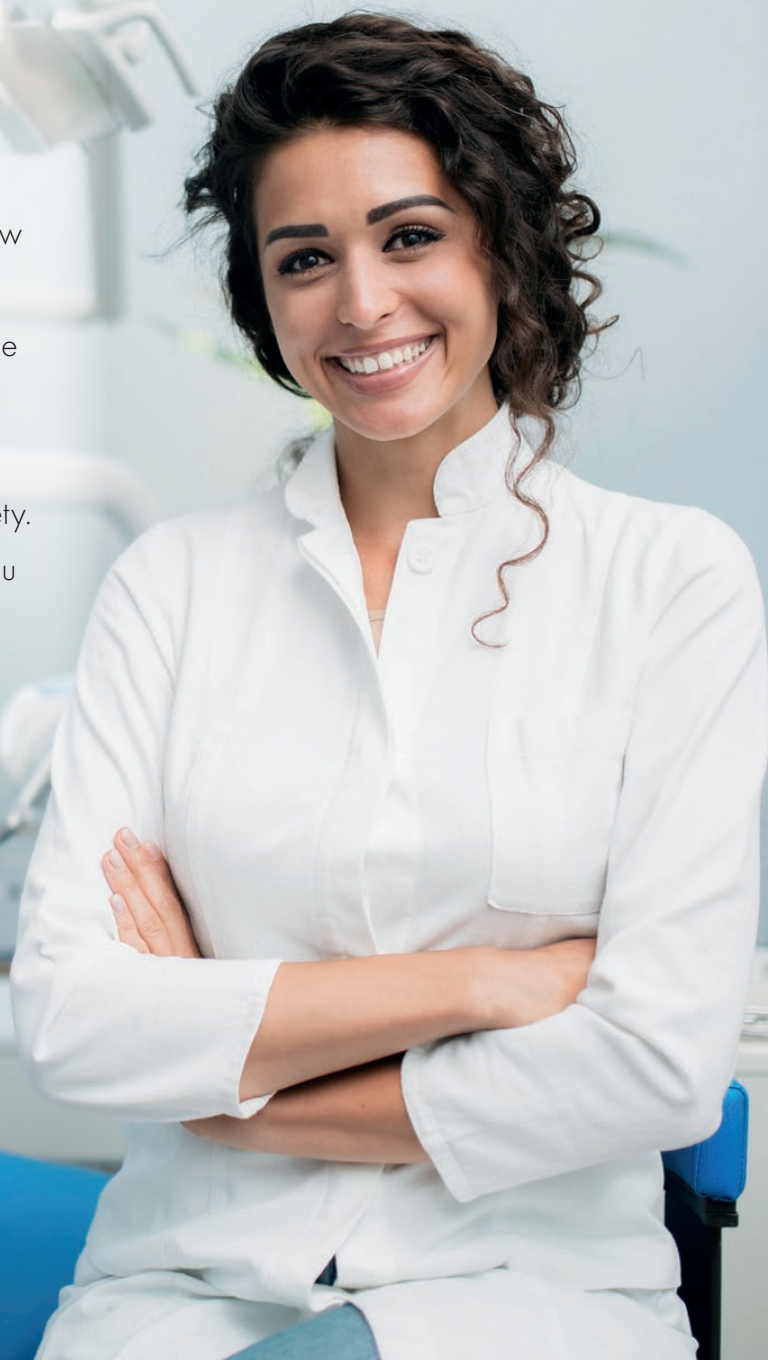

1 Praktyczne

- Łatwość użycia systemu higieny dzięki kodowaniu kolorami
- Łatwość użycia produktów dzięki ergonomicznemu kształtowi butelki
- Aplikatory do optymalnego dozowania
- Szybkie działanie i błyskawiczne wysychanie bez pozostałości
- Charakterystyczne i optymalne w przechowywaniu butelki 2,5 l



2 Zrównoważone

- Butelki z materiału w 100% nadającego się do recyklingu
- Niezawierające plastiku chusteczki dezynfekujące FD green
- Orotol plus pH 7 i MD 555 cleaner organic do bardziej zrównoważonej dezynfekcji i czyszczenia systemów ssących



Łatwe w użyciu – silne w działaniu



3 Bezpieczeństwo

- Sprawdzone, godne zaufania działanie
- Znajdują się na liście VAH i są zgodne z normami EN
- Wysoka skuteczność dezynfekcji i czyszczenia
- Kompleksowe spektrum działania

4 Nieszkodliwość


- Unikalna kombinacja substancji czynnych
- Szczególna pielęgnacja i ochrona dłoni
- Najwyższa kompatybilność materiałowa, zalecane przez czołowych producentów unitów
- Testowane klinicznie

5 Wygoda

- Proste i wydajne w użyciu
- Poręczne, jednolite opakowania
- Czyszczenie według planu
- Korki dozujące do precyzyjnego dawkowania
- Wysokowydajne

I LIKE IT!

Obszary specjalne – moc higieny dla
wyjątkowo długiej żywotności systemów ssących

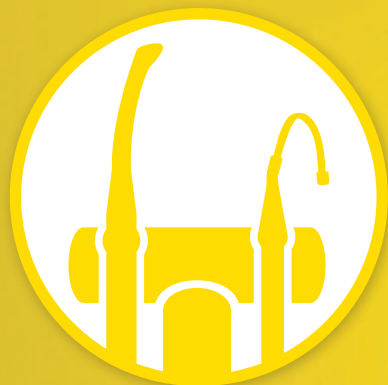

W 1965 roku firma Dürr Dental wprowadziła na rynek Orotol – pionierski środek do dezynfekcji systemów ssących, co wywarło trwały i pozytywny wpływ na stomatologię. Obecnie Orotol plus jest najczęściej stosowanym środkiem do dezynfekcji na świecie, a jego idealne uzupełnienie stanowi specjalny środek czyszczący MD 555 cleaner. Oba produkty stanowią perfekcyjnie dopasowany do siebie duet do delikatnej i wysoce skutecznej dezynfekcji oraz czyszczenia systemów ssących.

Dezynfekcja systemu ssącego



Oryginał od 1965 roku

Orotol plus | Dezynfekcja systemu ssącego

Niepieniący się koncentrat w płynie do jednoczesnej dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzowania i konserwacji wszystkich dentystycznych systemów ssących i separatorów amalgamatu

- Roztwór do skażonych systemów ssących – zapewnia niezawodną ochronę przed zakażeniami
- Usuwa najbardziej uporczywe osady
- Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych producentów unitów

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), działa na adenowirusy i norowirusy. Czwartorzędowe związki amoniowe

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



Zrównoważona higiena gabinetu

Orotol plus pH 7 | Dezynfekcja systemu ssącego

Neutralny i wysoce skuteczny koncentrat w płynie do jednoczesnej dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzowania i konserwacji wszystkich dentystycznych systemów ssących i separatorów amalgamatu

- Niezawodna ochrona przed zakażeniami i najwyższa siła czyszczenia
- > 95% składników organicznych łatwo ulegających biodegradacji wg wytycznych OECD
- Niepieniąca się i łagodna dla materiałów formuła

Spektrum działania²

Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy). Czwartorzędowe związki amoniowe

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



Orotol ultra | Dezynfekcja systemu ssącego

Koncentrat w proszku do jednoczesnej dezynfekcji, czyszczenia, dezodoryzowania i konserwacji wszystkich dentystycznych systemów ssących i separatorów amalgamatu

- Usuwa najbardziej uporczywe osady, także w trudno dostępnych miejscach
- Niewielkie stężenie użytkowe (już od 1%)

Spektrum działania³

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, mykobakteriobójczy, grzybobójczy, sporobójczy (Clostridium difficile), wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV, koronawirusy oraz wirusy bezotoczkowe, takie jak adenowirusy, norowirusy, poliovirusy, poliomawirusy SV40) Węglan sodu, nadtlenek wodoru

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

Opakowanie 500 g
OroCup, MD 550, MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic



¹ Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476, EN 17111 i EN 16615.

² Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 i EN 17111.

³ Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 17126, EN 14476 i EN 17111.

Czyszczenie systemów ssących i spluwaczek



Skutecznie rozpuszcza proszek do profilaktyki

MD 555 cleaner | Specjalny preparat czyszczący do systemów ssących

Niepieniący się koncentrat do czyszczenia systemów ssących i wszelkiego rodzaju separatorów amalgamatu

- Niezwykle intensywne działanie czyszczące osady (np. kamień)
- Szczególnie skuteczny do usuwania pozostałości proszku oraz piasku do profilaktyki
- Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych producentów unitów
- Idealny w połączeniu z Orotol plus

Składniki

Kwasy organiczne i nieorganiczne, niepieniące się tensydy

Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
OroCup, Orotol plus, Orotol plus pH 7,
Orotol ultra, MD 550



Zrównoważona higiena gabinetu

MD 555 cleaner organic | Specjalny preparat czyszczący do systemów ssących

Niepieniący się koncentrat do czyszczenia systemów ssących i wszelkiego rodzaju separatorów amalgamatu

- Niezwykle intensywne działanie czyszczące osady
- Na bazie kwasu cytrynowego, nie zawiera substancji zapachowych ani barwiących
- Szczególnie skuteczny do usuwania pozostałości proszku oraz piasku do profilaktyki
- Idealny w połączeniu z Orotol plus pH 7

Składniki

Kwasy organiczne, niepieniące się tensydy

Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
OroCup, Orotol plus, Orotol plus pH 7,
Orotol ultra, MD 550



MD 550 | Środek do czyszczenia spluwaczek

Niepieniący się, gotowy do użycia roztwór do intensywnego czyszczenia spluwaczek

- Bezproblemowe usuwanie pozostałości z wapnia, krwi czy tabletek do wybarwiania płytki nazębnej
- Jednoczesne czyszczenie, dezodoryzowanie i pielęgnacja spluwaczek
- Nie zawiera substancji ściernych – nie rysuje spluwaczek
- Antybakteryjny – skuteczny przeciwko bakteriom, prątkom gruźlicy i drożdżakom

Substancje czynne

Alkohole

Opakowania Idealne uzupełnienie

750 ml
Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra,
MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic

i Dlaczego potrzebny jest specjalny środek czyszczący taki jak MD 555 cleaner?

Podczas gdy Orotol plus usuwa osady organiczne z systemu, specjalny środek czyszczący MD 555 cleaner czyści pozostałości nieorganiczne. Należą do nich np. kamień, lecz także proszek do profilaktyki, który jest obecnie coraz częściej stosowany. Bez zastosowania MD 555 cleaner proszek może szybko tworzyć osady, a wskutek tego zablokować system.



OroCup | System pielęgnacyjny

Przyjazny dla użytkownika, zamknięty system pielęgnacyjny do dezynfekcji i czyszczenia systemów ssących i separatorów amalgamatu

- Wykorzystuje mieszanekę wody z powietrzem do optymalnego zwilżenia i efektywnego czyszczenia oraz dezynfekcji systemów ssących
- Umożliwia bezpieczne i wydajne dozowanie oraz stosowanie roztworu
- Adapter przyłączeniowy do wszystkich średnic węży ssących



**Wolumen
Idealne
uzupełnienie**

Dwulitrowy system pielęgnacyjny
Orotol plus, Orotol plus pH 7, Orotol ultra,
MD 555 cleaner, MD 555 cleaner organic

Z GÓRY NA DÓŁ

Dürr Dental pozwala na utrzymywanie systemu ssącego w czystości. Decydujące znaczenie ma jednak przy tym prawidłowe zastosowanie zgodnie z wytycznymi producenta.

Ten film pokazuje, jak prawidłowo stosować środki Orotol plus i MD 555 cleaner:
www.duerddental.com/how-to-orotol

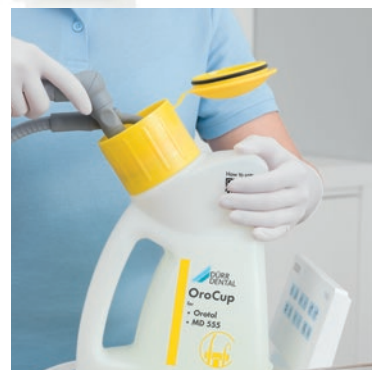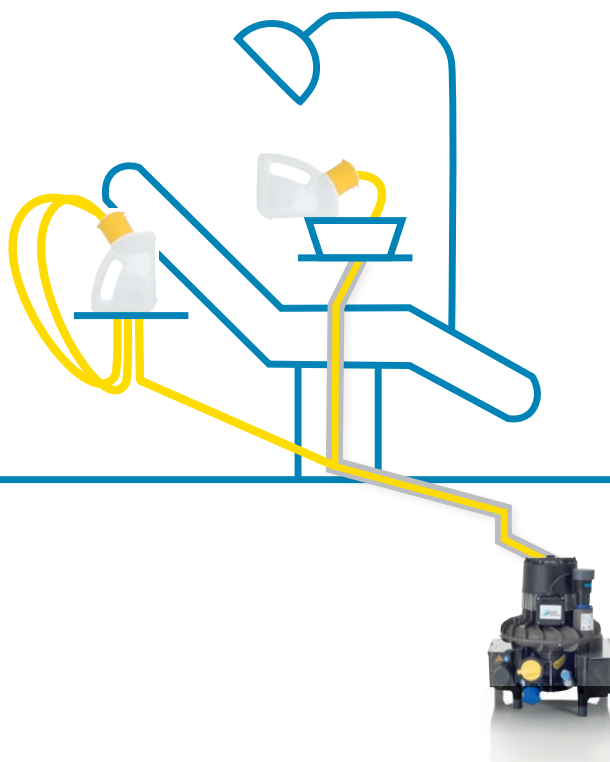

Wyciski i prace protetyczne



MD 530 | Środek do usuwania cementu i czyszczenia protez

Gotowy do użytku roztwór do usuwania np. cementu, kamienia nazębnego, plam nikotynowych, warstw tlenków

- Intensywne działanie czyszczące i niepozostawiające śladów usuwanie złożeń rozpuszczalnych w kwasach
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Można stosować w kąpeli ultradźwiękowej

Obszary zastosowania
Składniki
Opakowania
Idealne uzupełnienie

Protezy, mostki, koronki, szpatułki, szkło itd.
Kwasy nieorganiczne, tensydy
2,5 l
Hygobox



Możliwość stosowania także do czyszczenia tac instrumentów

MD 535 | Środek do usuwania gipsu

Gotowy do użytku roztwór do usuwania gipsu i alginianów

- Specjalny środek czyszczący o nadzwyczaj szybkim działaniu
- Bardzo skuteczne czyszczenie bez pozostałości
- Ze wskaźnikiem aktywności
- Można stosować w kąpeli ultradźwiękowej

Obszary zastosowania
Składniki
Opakowania
Idealne uzupełnienie

łyżki do wycisków, szpatułki do mieszania, noże do gipsu, pojemniki do mieszania, wszelkiego rodzaju materiały protetyczne itp.
Zasadowe składniki czyszczące i związki złożone
2,5 l
Hygobox



Trwałość 7 dni

MD 520 | Dezynfekcja wycisków

W pełni wirusobójczy, gotowy do użycia roztwór do skutecznej i bezpiecznej dla materiałów dezynfekcji oraz czyszczenia wycisków stomatologicznych, protez, prac protetycznych itd.

- Zastosowanie do alginatów, silikonów, gumy polietylenowej, hydrożeli, polisiarczków itp.
- Zwiększona precyzja modelu odniesienia z gipsu dzięki efektywnemu działaniu czyszczącemu
- Nie wpływa na stabilność wymiarów lub kompatybilność gipsu

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, wirusobójczy (wirusy otoczkowe w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy, a także wirusy bezotoczkowe, takie jak adenowirusy, poliowirusy SV40, norowirusy i poliovirusy)
Czwartorzędowe związki amoniowe, dialdehyd glutarowy
2,5 l, 10 l
Puszka do dezynfekcji MD 520, Hygobox, Hygojet

Substancje czynne
Opakowania
Idealne uzupełnienie

Akcesoria i urządzenie



Hygojet

Służą do dezynfekcji i czyszczenia wycisków oraz prac protetycznych

- Zamknięty system zapobiega zakażeniom krzyżowym
- Oszczędny w użyciu – wystarczy zaledwie 10 ml MD 520 na wycisk
- Nadzwyczaj efektywny – 6 wycisków w czasie 12 minut
- Sprawdzony proces dezynfekcji – potwierdzony opinią ekspertów

Wielkość
(szer. x wys. x gł.)
Idealne
uzupełnienie

56 x 34 x 32 cm
MD 520 Dezynfekcja wycisków



Hygobox

Wytrzymały, odporny na uszkodzenia pojemnik do transportu i dezynfekcji

- Ergonomiczne uchwyty pozwalające na bezpieczne przenoszenie
- Stabilna pozycja ociekania zintegrowanego wkładu sitowego
- Specjalnie uformowane szczeliny zapobiegające zaczepianiu się instrumentów

Warianty
kolorystyczne

Wolumen
Wielkość
(wys. x szer. x gł.)
Idealne
uzupełnienie

Dostępne są antracytowe pokrywy z niebieskim lub żółtym wkładem sitowym oraz pokrywy w 5 różnych kolorach z białym wkładem sitowym
Pojemność 3 litry
13 x 32,5 x 21 cm
MD 520, MD 535, ID 212, ID 212 forte plus, ID 213, ID 215



MD 520 | Puszka do dezynfekcji

Puszka do dezynfekcji przez zanurzenie i czyszczenia przy użyciu środka MD 520 do dezynfekcji wycisków i odlewów

- Zawiera specjalne uchwyty w pokrywie na maks. 2 łyżki do wycisków
- Z praktycznym wskaźnikiem zajętości/przypomnieniem podczas zawieszania

Wolumen
Rozmiar
Idealne
uzupełnienie

Pojemność maksymalnie 1 litr
Wysokość 19 cm, Ø: 11,7 cm
MD 520 Dezynfekcja wycisków



To takie proste

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wartościowe wskazówki na temat dezynfekcji wycisków i odlewów.



I LIKE IT!

Powierzchnie – lśniąco czyste i dające
absolutną pewność



Dokładne, ale delikatne czyszczenie i dezynfekcja powierzchni zapobiega zagrożeniom, a jednocześnie dba o wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Dlatego Dürr Dental oferuje bogaty asortyment koncentratów i gotowych do użytku roztworów, a także chusteczek.

Dezynfekcja i czyszczenie bez alkoholu



FD 300 | Dezynfekcja powierzchni

W pełni wirusobójczy i bezalkoholowy koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Niezwykle krótki czas działania
- Ekonomiczny w użyciu: do 250 litrów gotowego do użytku roztworu 1 %
- Dobra kompatybilność materiałowa

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, prątkobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe i bezotoczkowe)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

2,5 l
Suche chusteczki (patrz strona 20)



FD 312 | Dezynfekcja powierzchni*

Bezalkoholowy koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych produktów medycznych, wyposażenia medycznego i podłóg

- Ekonomiczny w użyciu: do 250 litrów gotowego do użytku roztworu 1 %
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Niezwykle przyjemny zapach

Spektrum działania²

Środek bakteriobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

Alkil(C12-18) chlorku dimetylobenzylamonu (czwartorzędowe związki amoniowe)
2,5 l
Suche chusteczki (patrz strona 20)



FD 312 wet wipes | Dezynfekcja powierzchni*

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia podłóg, wyposażenia gabinetu itp.

- Skuteczne zwilżanie powierzchni
- Chusteczki o odpornej na rozdarcia strukturze plastra miodu
- Przyjemny zapach

Spektrum działania²

Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy)

Substancje czynne Opakowania Wielkość chusteczki

Alkil(C12-18) chlorku dimetylobenzylamonu (czwartorzędowe związki amoniowe)
Opakowanie zawierające 15 chusteczek
22 x 42 cm

¹ Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 i EN 16615.

² Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14476 i EN 16615.

* Ostrożnie stosować środki dezynfekujące. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.

Gotowe do użytku roztwory alkoholowe do dezynfekcji



Także w wersji bezzapachowej

FD 322 | Szybka dezynfekcja

Szybko działający, gotowy do użytku roztwór do dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Bardzo krótki czas działania
- Wysychanie bez pozostałości
- Dobra kompatybilność materiałowa

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV40)

Substancje czynne Opakowania

750 ml do Hygowie Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
FD 322 bezzapachowy: 2,5 l, 10 l

Idealne uzupełnienie

Suche chusteczki (patrz strona 20), butelka 500 ml ze spryskiwaczem, głowica natryskowa



FD 333 | Szybka dezynfekcja

Szybko działający, gotowy do użytku roztwór do dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Dobra kompatybilność materiałowa
- Świeży, cytrynowy zapach
- Szybkie wysychanie

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

750 ml do Hygowie Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Suche chusteczki (patrz strona 20), butelka 500 ml ze spryskiwaczem, głowica natryskowa



w pełni wirusobójczy

FD 333 forte | Szybka dezynfekcja

W pełni wirusobójczy, gotowy do użytku roztwór do dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Dobra kompatybilność materiałowa
- Świeży, cytrynowy zapach
- Szybkie działanie dezynfekujące

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, mykobakteriobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe i bezotoczkowe)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l, 10 l
Suche chusteczki (patrz strona 20), butelka 500 ml ze spryskiwaczem, głowica natryskowa



O zmniejszonej zawartości alkoholu

FD 366 sensitive | Dezynfekcja delikatnych powierzchni

Gotowy do użytku roztwór o zmniejszonej zawartości alkoholu do szybkiej dezynfekcji wrażliwych powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych producentów unitów

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy, działa na norowirusy)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe
750 ml do Hygowie Plus, 1 l, 2,5 l, 10 l
Suche chusteczki (patrz strona 20), butelka 500 ml ze spryskiwaczem, głowica natryskowa, środek do czyszczenia sztucznej skóry FD 360



Zawierające alkohol chusteczki do dezynfekcji

Do powierzchni odpornych na alkohol, dostępne w 3 wielkościach opakowania



FD 322 wipes | Szybka dezynfekcja

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Bardzo krótki czas działania
- Wysychanie bez pozostałości
- Dobra kompatybilność materiałowa

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV40)

Substancje czynne

Alkohole

Opakowania

Dozownik 100 chusteczek, opakowanie uzupełniające 100 chusteczek

Wielkość chusteczki

20 x 30 cm



FD 322 top wipes | Szybka dezynfekcja

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Opakowanie zawierające 50 chusteczek

Wielkość chusteczki

17,5 x 25 cm



FD 322 premium wipes | Szybka dezynfekcja

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Dozownik 80 chusteczek, opakowanie uzupełniające 80 chusteczek

Wielkość chusteczki

14 x 19 cm

Kompatybilność materiałowa środków dezynfekujących

Środek do dezynfekcji o dużej zawartości alkoholu może negatywnie wpływać na wrażliwe materiały i skrócić ich trwałość. Należy zawsze używać odpowiednich środków dezynfekujących do poszczególnych materiałów.

Więcej informacji w materiale wideo na stronie duerrdental.com/FD366



Zawierające alkohol chusteczki do dezynfekcji

Bezzapachowe, dostępne w 2 wielkościach opakowania



Bezzapachowe

FD 333 wipes | Szybka dezynfekcja

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Szybkie wysychanie
- Bezzapachowe

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy)

Substancje czynne

Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe

Opakowania

Dozownik 110 chusteczek, opakowanie uzupełniające 110 chusteczek

Wielkość chusteczki

14 x 22 cm



Bezzapachowe

FD 333 top wipes | Szybka dezynfekcja

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Wielkość chusteczki

Opakowanie zawierające 50 chusteczek, 17,5 x 25 cm

W pełni wirusobójcze, dostępne w 2 wielkościach opakowania



w pełni wirusobójczy

FD 333 forte wipes | Szybka dezynfekcja

W pełni wirusobójcze, gotowe do użytku chusteczki do szybkiej dezynfekcji odpornych na alkohol powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Świeży, cytrynowy zapach

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, mykobakteriobójczy, grzybobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy, adenowirusy, norowirusy), wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe i bezotoczkowe)

Substancje czynne

Opakowania

Dozownik 100 chusteczek, opakowanie uzupełniające 100 chusteczek

Wielkość chusteczki

20 x 30 cm



w pełni wirusobójczy

FD 333 forte premium wipes | Szybka dezynfekcja

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Dozownik 80 chusteczek, opakowanie uzupełniające 80 chusteczek

Wielkość chusteczki

14 x 19 cm



Do małych powierzchni, dostępne w 2 wariantach



FD 350 | Szybka dezynfekcja

Chusteczki do szybkiej dezynfekcji odpor-
nych na alkohol powierzchni inwazyjnych
i nieinwazyjnych produktów medycznych
oraz wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Szybkie, niepozostawiające śladów wysychanie
- 3 różne zapachy: klasyczny, kwiatowy, cytrynowy

Spektrum działania¹

Substancje czynne Opakowania

Wielkość chusteczki

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobój-
czy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy
(dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV,
HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu
wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy,
adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV40)
Alkohole

Dozownik 110 chusteczek, opakowanie
uzupełniające 110 chusteczek
14 x 22 cm



Włókna naturalne bez tworzyw sztucznych

FD 350 green | Szybka dezynfekcja

Gotowe do użytku chusteczki dezynfekujące
z wolnych od plastiku włókien naturalnych do
szybkiej dezynfekcji odpor-nych na alkohol
powierzchni inwazyjnych i nieinwazyjnych produk-
tów medycznych oraz wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Szybkie, niepozostawiające śladów wysychanie
- Dobra kompatybilność materiałowa i wyjąt-
kowo duża wydajność z jednej chusteczki

Spektrum działania¹

Substancje czynne Opakowania

Wielkość chusteczki

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobój-
czy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy
(dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV,
HIV i koronawirusy), w ograniczonym stopniu
wirusobójczy PLUS (dezaktywuje rotawirusy,
adenowirusy, norowirusy, poliomawirusy SV40)
Alkohole

Dozownik 50 chusteczek, opakowanie
uzupełniające 50 chusteczek
14 x 19 cm



Do wrażliwych powierzchni, dostępne w 2 wielkościach opakowania



O zmniejszonej zawartości alkoholu

FD 366 sensitive wipes | Szybka dezynfekcja

Gotowe do użytku chusteczki do szybkiej dezyn-
fekcji wrażliwych powierzchni inwazyjnych
i nieinwazyjnych produktów medycznych oraz
wyposażenia medycznego

- Szybkie działanie dezynfekujące
- Zalecane przez producentów sprzętu
- Bezzapachowe

Spektrum działania¹

Substancje czynne Opakowania

Wielkość chusteczki

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżako-
bójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy
(dezaktywuje wirusy otoczkowe w tym HBV, HCV,
HIV i koronawirusy, działa na adenowirusy
bezooczkowe i norowirusy)

Alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe

Dozownik 100 chusteczek, opakowanie
uzupełniające 100 chusteczek
20 x 30 cm



O zmniejszonej zawartości alkoholu

FD 366 sensitive top wipes | Szybka dezynfekcja

Dane produktu jak wyżej

Opakowania Wielkość chusteczki

Opakowanie zawierające 50 chusteczek
17,5 x 25 cm

Suche chusteczki

Idealne do dużych powierzchni, dostępne w 2 wielkościach opakowania



Uniwersalne zastosowanie

FD multi wipes

Uniwersalne, suche chusteczki do nasączenia środkami do dezynfekcji i czyszczenia

- Chusteczki do zastosowań uniwersalnych w połączeniu ze środkami do dezynfekcji powierzchni
- Nie pozostawiają śladów, odporne na rozdarcia
- Bardzo dobre nawilżanie i brak zarysowań na powierzchni

Opakowania

Dozownik 180 chusteczek, opakowanie uzupełniające 180 chusteczek
20 x 30 cm

Wielkość chusteczki Idealne uzupełnienie

Do stosowania ze wszystkimi roztworami gotowymi do użytku oraz koncentratami Dürr Dental do dezynfekcji powierzchni. Sprawdzone i dopuszczone według testu 4 pól (EN 16615).



Uniwersalne zastosowanie

FD multi wipes compact

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Dozownik 60 chusteczek, opakowanie uzupełniające 60 chusteczek
29 x 30 cm

Wielkość chusteczki Idealne uzupełnienie

Do stosowania ze wszystkimi roztworami gotowymi do użytku oraz koncentratami Dürr Dental do dezynfekcji powierzchni. Sprawdzone i dopuszczone według testu 4 pól (EN 16615).

Przyjazne dla środowiska chusteczki, dostępne w 2 wielkościach opakowania



Włókna naturalne bez tworzyw sztucznych

FD multi wipes green

Uniwersalne, suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni z produkowanych w sposób przyjazny dla środowiska, niezawierających plastiku włókien naturalnych

- Bardzo ekonomiczne dzięki dużej wydajności
- Odporne na rozdarcie chusteczki z włókniyny o drobnej strukturze
- Bardzo dobre nawilżanie i brak zarysowań na powierzchni

Opakowania

Dozownik 180 chusteczek, opakowanie uzupełniające 180 chusteczek
20 x 30 cm

Wielkość chusteczki Idealne uzupełnienie

Sprawdzone i dopuszczone według testu 4 pól (EN 16615) z wykorzystaniem FD 312 (4%), FD 322, FD 333 i FD 333 forte.



Włókna naturalne bez tworzyw sztucznych

FD multi wipes compact green

Dane produktu jak wyżej

Opakowania

Dozownik 60 chusteczek, opakowanie uzupełniające 60 chusteczek
29 x 30 cm

Wielkość chusteczki Idealne uzupełnienie

Sprawdzone i dopuszczone według testu 4 pól (EN 16615) z wykorzystaniem FD 312 (4%), FD 322, FD 333 i FD 333 forte.



Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry

Zalecane przez producentów sprzętu



FD 360 Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry

Płyn do głębokiego czyszczenia i pielęgnacji powierzchni ze sztucznej skóry

- Delikatny środek do czyszczenia połączony ze środkiem do pielęgnacji do utrzymania długiej żywotności
- Intensywne działanie czyszczące – usuwa wszelkiego rodzaju plamy, pozostałości i przebarwienia
- Udowodniona kompatybilność materiałowa – zalecany przez czołowych producentów unitów
- W przypadku unitów zabiegowych idealny w połączeniu z FD 366 sensitive

Składniki

Specjalne tensydy, związki silikonowe i formuła pielęgnacyjna na bazie olejku z awokado

Opakowania

Zestaw obejmujący butelkę ze spryskiwaczem 250 ml, 1 FD Ściereczkę do polerowania i 5 specjalnych gąbek

Idealne uzupełnienie

FD 366 sensitive, FD 366 sensitive wipes, FD 366 sensitive top wipes, FD Ściereczka do polerowania



FD Ściereczka do polerowania

Ściereczka z mikrofibry ze specjalnymi włóknami do delikatnego czyszczenia i polerowania delikatnych powierzchni

- Szczególnie dokładna dzięki drobnym włóknom
- Szybkie polerowanie niepozostawiające śladów
- Usuwa niewielkie cząsteczki brudu i kurzu dzięki właściwościom antystatycznym
- Łatwa do prania do 60 °C

Opakowania Wielkość chusteczki

Dostępna jako pojedyncza ściereczka 32 x 32 cm

Nasza zrównoważona dezynfekcja powierzchni

Chusteczki do dezynfekcji FD 350 green oraz suche ściereczki włókninowe FD multi wipes green i FD multi wipes compact green są wyprodukowane w sposób bezpieczny dla środowiska z niezawierających plastiku włókien naturalnych.

green



Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać
więcej informacji.



I LIKE IT!

Łagodna higiena dłoni i skuteczne
zapobieganie zakażeniom



Dezynfekcja dłoni ma ogromne znaczenie dla profilaktyki zakażeń. Równie istotna jest ochrona narażonej skóry. Preparaty Dürr Dental HD są przetestowane dermatologicznie, skuteczne, a jednocześnie przyjazne dla skóry.

Dezynfekcja i czyszczenie rąk



HD 420 plus | Dezynfekcja rąk*

Preparat do wcierania z alkoholem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

- Zawiera substancje natłuszczające
- Produkt testowany dermatologicznie
- Bezzapachowe

Spektrum działania

Higieniczna dezynfekcja rąk: środek bakteriobójczy (w tym prątkobójczy i mykobakteriobójczy), drożdżakobójczy i skuteczny przeciwko wirusom otoczkowym (w ograniczonym stopniu wirusobójczy) oraz przeciwko rotawirusom, adenowirusom i norowirusom (w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS); chirurgiczna dezynfekcja rąk: środek bakteriobójczy i drożdżakobójczy
Izopropanol, propanol

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

500 ml, 1 l, 2,5 l¹, 10 litrów¹
Dozownik preparatów (patrz strona 24/25)



HD 435 | Emulsja do mycia

Łagodna emulsja do mycia rąk

- Wspomaga naturalną warstwę ochronną skóry – wartość pH typowa dla skóry
- Produkt testowany dermatologicznie

Opakowania Idealne uzupełnienie

500 ml, 1 l, 2,5 l
Dozownik preparatów (patrz strona 24/25)



¹ Produktów używanych do chirurgicznej dezynfekcji rąk nie wolno uzupełniać ani przelewać do innych pojemników.

* Ostrożnie stosować środki dezynfekujące. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.

(Numer pozwolenia: EU-0032838-0001 1-1; posiadacz pozwolenia: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Niemcy)

Dozownik preparatów



Z czujnikiem

Touchless XT | Uniwersalny dozownik preparatów

Zasilany bateryjnie dozownik preparatów z czujnikiem do bezdotykowej, higienicznej aplikacji preparatów do rąk

- Zasilanie bateryjne z akustycznym wskaźnikiem poziomu naładowania
- Wysoki standard higieny dzięki obudowie z anodowanego aluminium
- Pompa ze stali szlachetnej dostosowana do sterylizacji w autoklawie lub pompa jednorazowa

Wielkość (szer. x wys. x gł.) 9,2 x 33,0 x 21,0 cm

Opakowania Do butelek 500 ml (XT 400),
Do butelek 1 l (XT 1000)

Idealne uzupełnienie HD 420 plus, HD 435 w butelce 500 ml lub w butelce 1 l, uchwyt tacki, nogi do instalacji na stole, podajnik wolnostojący, pompki jednorazowe



Opcjonalnie z czujnikiem

RX | Uniwersalny dozownik preparatów

Obsługiwany ręcznie lub sterowany czujnikowo uniwersalny dozownik do aplikacji preparatów do rąk

- Ręczny (RX 5 M, RX 10 M) lub bezdotykowy (RX 5 T)
- Obudowa i tacka ociekowa wykonane z wytrzymałego białego tworzywa sztucznego
- Wytrzymała pompa z tworzywa sztucznego

Wielkość (szer. x wys. x gł.) RX 5 M: 10,2 x 27,0 x 14,2 cm,
RX 10 M: 33,4 x 18,4 x 21,8 cm,
RX 5 T: 27 x 15,7 x 22,6 cm

Opakowania Do butelki 500 ml (RX 5 M i RX 5 T),
Do butelki 1 l (RX 10 M)

Idealne uzupełnienie HD 420 plus, HD 435 w butelce 500 ml lub 1 l



S/L | Uniwersalny dozownik preparatów

Uniwersalny dozownik preparatów do montażu ściennego, do aplikacji preparatów do rąk

- Szczególna wygoda obsługi
- Dostępny z krótkim (S) lub długim (L) ramieniem
- Wykonanie z trwałego aluminium i stali szlachetnej
- Pompa nadająca się do sterylizacji w autoklawie lub pompa jednorazowa

Wielkość (szer. x wys. x gł.) S 400/L 400: 8,2 x 24,5 x 8,2 cm,
L 1000: 9,2 x 29 x 9 cm, długość ramienia:
S 400: 16 cm, L 400: 21,5 cm, L 1000: 22,5 cm

Opakowania Do butelki 500 ml (S 400 i L 400),
Do butelki 1 l (L 1000)

Idealne uzupełnienie HD 420 plus, HD 435 w butelce 500 ml lub w butelce 1 l, pompki jednorazowe



Materiał wideo na temat Touchless XT

Zobacz praktyczne zastosowanie dozownika preparatów Touchless XT



Higieniczna dezynfekcja rąk

Procedura wcierania wg EN 1500



Dłoń na dłoni



Prawa dłoń nad grzbietem lewej dłoni i lewa nad grzbietem prawej dłoni



Dłoń na dłoni ze skrzyżowanymi, rozstawionymi palcami



Zewnętrzna część palców na przeciwnych dłoniach ze skrzyżowanymi palcami



Okrężne pocieranie kciuka w zamkniętej lewej dłoni i odwrotnie



Okrężne pocieranie tam i z powrotem z zamkniętymi opuszkami palców prawej dłoni w lewej dłoni i odwrotnie



Widocznie czyste ręce muszą być wilgotne przez cały czas; może to wymagać kilkakrotnego pobrania środka do dezynfekcji rąk (w sumie co najmniej 3 ml).



Materiał wideo na temat dezynfekcji rąk

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję krok po kroku



I LIKE IT!

Od ręcznego czyszczenia instrumentów
aż po dokumentację i przechowywanie



Do ręcznej dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium ogólnego, chirurgicznego, jak również wrażliwego, firma Dür Dental oferuje bezaldehydowe, niepowodujące przywierania kombinacje substancji czynnych. Zapewniają one delikatną, a zarazem niezawodną i skuteczną dezynfekcję instrumentów. Łagodne obchodzenie się z instrumentami, bezkompromisowe usuwanie zarazków – na środkach do dezynfekcji instrumentów marki Dür Dental można polegać.

Dezynfekcja instrumentów



Trwałość do 7 dni

ID 212 | Dezynfekcja instrumentów

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji instrumentów w sposób bezpieczny dla materiałów

- Przeznaczony do instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego
- Niezwykle krótki czas działania
- Znakomita kompatybilność materiałowa w przypadku instrumentów z elementami gumowymi i silikonowymi

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy w urządzeniu ultradźwiękowym, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy) działa na adenowirusy bezotoczkowe i norowirusy Czwartorzędowe związki amoniowe

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
Hygobox



Trwałość do 7 dni

ID 212 forte plus | Dezynfekcja instrumentów

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego

- Znakomita kompatybilność materiałowa
- Trwałość do 7 dni
- Szybka dezynfekcja i czyszczenie

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy w urządzeniu ultradźwiękowym, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy) działa na adenowirusy bezotoczkowe i norowirusy Czwartorzędowe związki amoniowe

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

1 l, 2,5 l
Hygobox



Trwałość do 14 dni

ID 213 | Dezynfekcja instrumentów

Koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji instrumentarium ogólnego, chirurgicznego i obrotowego o szerokim spektrum działania

- Niezwykle wydajny dzięki długiej trwałości do 14 dni
- Dobra kompatybilność materiałowa dzięki inhibitorom korozji

Spektrum działania¹

Środek bakteriobójczy, prątkobójczy, mykobakteriobójczy w urządzeniu ultradźwiękowym, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV i HIV, a także norowirusy i poliomawirusy SV40)

Substancje czynne Opakowania Idealne uzupełnienie

Alkiloaminy, czwartorzędowe związki amoniowe
1 l, 2,5 l
Hygobox



¹ Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 i EN 17111.

Czyszczenie instrumentów i dezynfekcja wiertel



ID 215 | Enzymatyczny preparat do czyszczenia instrumentów

Koncentrat do ręcznego, enzymatycznego czyszczenia instrumentów przed dezynfekcją

- Udowodniona ochrona personelu dzięki działaniu antybakteryjnemu
- Wyjątkowe działanie czyszczące – rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia
- Dobra kompatybilność materiałowa

Ochrona personelu¹

Substancje czynne
Opakowania
Idealne uzupełnienie

Środek bakteriobójczy, drożdżakobójczy, w ograniczonym stopniu wirusobójczy (dezaktywuje wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV). Czwartorzędowe związki amoniowe, guanidyny

2,5 l
Hygobox



Trwałość do 7 dni

ID 220 | Dezynfekcja wiertel

W pełni wirusobójczy, gotowy do użytku roztwór do czyszczenia i dezynfekcji odpornych na alkohol instrumentów obrotowych

- Wysoka efektywność czyszczenia, szczególnie w drobnych szczelinach wiertel i frezów
- Skuteczna ochrona przed korozją i długa trwałość wynosząca do 7 dni
- Bardzo krótki czas działania

Spektrum działania²

Substancje czynne
Opakowania

Środek bakteriobójczy, mykobakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (wirusy otoczkowe, w tym HBV, HCV, HIV i koronawirusy, a także wirusy bezotoczkowe, takie jak adenowirusy, poliomawirusy SV40, norowirusy i poliovirusy)

Alkohole w środowisku zasadowym

1 l, 2,5 l

Hygobox

Wytrzymały, odporny na uszkodzenia pojemnik do transportu i dezynfekcji

- Ergonomiczne uchwyty pozwalające na bezpieczne przenoszenie
- Stabilna pozycja ociekania zintegrowanego wkładu sitowego
- Specjalnie uformowane szczeliny zapobiegające zaczepianiu się instrumentów

Warianty kolorystyczne

Wolumen
Wielkość (wys. x szer. x gł.)
Idealne uzupełnienie

Dostępne są antracytowe pokrywy z niebieskim lub żółtym wkładem sitowym oraz pokrywy w 5 różnych kolorach z białym wkładem sitowym
Pojemność 3 litry
13 x 32,5 x 21 cm

ID 212, ID 212 forte plus, ID 213, ID 215, MD 520, MD 535



¹ Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14561, EN 14562 i EN 17111.

² Sprawdzony wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 i EN 17111.

Urządzenia i wyposażenie



Dostępny w 2 rozmiarach komór: 17 l/22 l

Hygoclave 40/50

Hygoclave 50 firmy Dürr Dental to profesjonalne rozwiązanie klasy B dla gabinetów stomatologicznych, które wyróżnia się szczególnie wysoką wydajnością, a za sprawą przemyślanej koncepcji obsługi zapewnia maksymalną efektywność i najwyższy komfort podczas codziennej pracy.

- Wysokowydajny system sterylizujący i suszący z dodatkowym programem uniwersalnym dla zwiększonego bezpieczeństwa, nawet podczas sterylizacji przedmiotów o złożonej budowie z otworami
- Elastyczne zasilanie w świeżą wodę i zintegrowana kontrola jakości świeżej wody
- Niskie zużycie wody i energii
- Wszystkie dane są pod ręką i zostają udokumentowane dzięki połączeniu z VistaSoft Monitor oraz programami do prowadzenia dokumentacji stomatologicznej*

Komfort obsługi

Intuicyjna koncepcja obsługi, 5-calowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości, automatyczna blokada drzwi

Wielkość

(wys. x szer. x gł.)

Hygoclave 50: 493 x 484 x 642 mm

Hygoclave 50 Plus: 493 x 484 x 642 mm

Hygoclave 40: 49,3 x 48,4 x 65,4 cm

Hygoclave 40 Plus: 49,3 x 48,4 x 65,4 cm

Opakowania

2 wielkości komory: 17 litrów i 22 litry



Hygopac

Zgrzewarka przelotowa do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych na wysterylizowane narzędzia

- Optymalny docisk dla trwałego zgrzewania
- Zasada działania przypominająca taśmę produkcyjną do szybkiej i efektywnej pracy
- Bezstopniowa regulacja temperatury zapewniająca optymalny zgrzew

Wielkość

(wys. x szer. x gł.)

16,0 x 43,5 x 13,5 cm

Idealne

uzupełnienie

Torebka Hygofol, rolka Hygofol, stół na instrumenty, Hygofol Station

Według DIN EN ISO 11607-2

Hygopac View

Nadająca się do walidacji zgrzewarka przelotowa do zgodnego z normami zamykania opakowań sterylnych zgodnie z normą DIN EN ISO 11607-2.

- Niezwykle kompaktowy design wymagający niewiele miejsca do instalacji
- Proces dokumentacji dzięki zapisowi na karcie SD i połączeniu sieciowemu

Komfort obsługi

Intuicyjna obsługa dzięki dotykowemu wyświetlaczowi

Wielkość

(wys. x szer. x gł.)

17,0 x 37,0 x 14,0 cm

Idealne

uzupełnienie

Torebka Hygofol, rolka Hygofol, stół na instrumenty, Hygofol Station

* dostępne tylko w przypadku serii Hygoclave 50

Urządzenia i wyposażenie



Hygofol

Opakowanie wysterylizowanych narzędzi zapewnia najwyższe bezpieczeństwo dzięki wielowarstwowej folii z laminatu i odpornemu na rozdarcia papierowi sterylizacyjnemu

- Wysoka odporność na przebicie i znakomita odporność mechaniczna
- Wysoka odporność spoiny na rozciąganie
- Hygofol jako praktyczne, prefabrykowane rękawy w 3 rozmiarach
- Hygofol do indywidualnego konfekcjonowania w postaci rolek w 5 rozmiarach

Opakowania Role

Role Hygofol, torebki Hygofol

Długość rolki: 100 m

Szerokość rolki: 5 / 7,5 / 10 / 15 / 25 cm

Długość torebki: 30 cm

Szerokość torebki: 7,5 / 10 / 15 cm



Hygoprint

System do oznaczania opakowań wysterylizowanych narzędzi

- Szybka i łatwa dokumentacja procesu sterylizacji
- Precyzyjne oznakowanie wszystkim niezbędnymi danymi

Komfort obsługi Idealne uzupełnienie

Niezwykle lekki i poręczny

Jedno- lub dwustronnie przylepne etykiety, blok do dokumentacji zawierający 100 kartek, zapasowa kolorowa rolka



Hygoprint Easy

Drukarka zapewnia możliwość wydruku zarówno protokołu cyklu, jak też etykiet z kodem kreskowym. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonego cyklu sterylizacyjnego

- Wielkość etykiet zgodnie z wytycznymi – możliwość naniesienia poza spoiną zgrzewaną
- Dane na etykietach: urządzenie (REF i SN), program, data wsadu, użytkownik (dopuszczono przez), data przydatności

Komfort obsługi

Kod paskowy do skanowania w przypadku cyfrowego zarządzania danymi

Rozmiar (wys. x szer. x gł.) (wys. x szer.) Idealne uzupełnienie

Hygoprint Easy: 16,9 x 12,5 x 22,1 cm

Etykiety Hygoprint Easy: 2,5 cm x 5,1 cm

Hygoprint Easy Etykiety i rolki papieru



Szybki test

Hygotest

Przyrząd testowy Helix do regularnego, szybkiego i prostego wykonywania testu Helix

- PCD (Process Challenge Device-przyrząd PCD) i 250 wskaźników
- Do użytku jako system kontroli wsadu i testu Bowiego-Dicka

Opakowania

Przyrząd testowy Helix z zestawem 250 pasków testowych.



Hygodem 90

Hygodem 90 oznacza wysoką jakość, zamkniętą w kompaktowym urządzeniu. Urządzenie do wymiany jonowej przygotowuje wodę z instalacji w trzech wkładach i w przypadku małej ilości miejsca może zostać podłączone bezpośrednio do Hygoclave 50.

- Urządzenie do wymiany jonowej
- Korzystna cena zakupu
- Małe zapotrzebowanie na miejsce

Komfort obsługi

Wygodą za sprawą 3 wkładów do wymiany jonowej, prosta konserwacja dzięki zaworowi odpowietrzającemu, łatwy montaż za pomocą szybkozłączek

Zestaw wkładów do Hygodem 90

Idealne uzupełnienie



Hygopure 90

Gdy Hygoclave jest maksymalnie wykorzystywany w ciężkiej, codziennej pracy, wymaga solidnego i niezawodnego partnera: Hygopure 90 posiada dużą pojemność i umożliwia jednorazowy pobór większych ilości (kilkunastu litrów) wody demineralizowanej

- Urządzenie do odwróconej osmozy wraz z kurkiem spustowym i zasobnikiem
- Duża pojemność
- Moduł Eco umożliwia oszczędność wody do 70%

Komfort obsługi


Kilka poziomów filtracji i membrana o wysokiej wydajności z zaworem serwisowym do kontroli poziomu skuteczności, łatwy montaż za pomocą szybkozłączek

Zestaw wkładów do Hygopure 90, membrana DF50 do Hygopure 90, zawór spustowy ze stali nierdzewnej do Hygopure 90, urządzenie do pomiaru przewodnictwa HMEC1, zawór zamykający dopływ wody LD1

Idealne uzupełnienie



Technologia higieny Dürr Dental – najwyższa wydajność

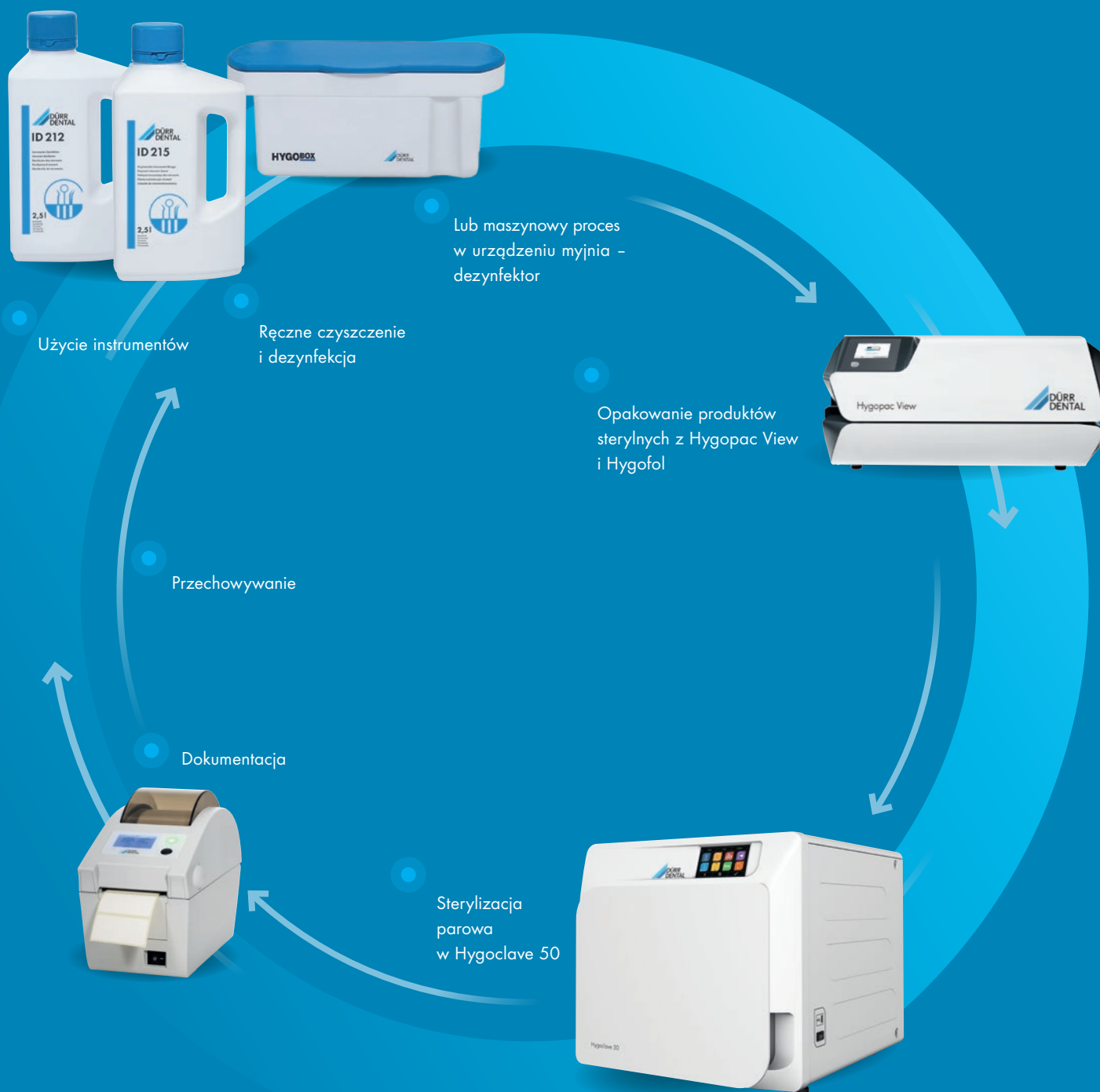

Od ponad 80 lat firma Dürr Dental pracuje nad wprowadzaniem nowych technologii do medycyny – Made in Germany. Dzięki temu oraz mając za cel systematyczne udoskonalanie naszej oferty w zakresie techniki związanej z higieną, możemy dzisiaj zaproponować liczne innowacyjne systemowe rozwiązania techniczne, za pomocą których codzienne działania higieniczne i przygotowawcze w gabinecie stomatologicznym są w najwyższym stopniu wydajne i można je przeprowadzać z najlepszymi wynikami.

W połączeniu z systemem higieny Dürr Dental do dyspozycji oddajemy niepokonany zespół.



Najlepsze dla Twojego gabinetu

Higiena i technika

- Nie do pobicia: rozwiązania techniczne w połączeniu z preparatami do czyszczenia i dezynfekcji
- Ponad 80 lat doświadczenia w technologii medycznej
- Około 60 lat doświadczenia i innowacji w obszarze higieny gabinetu
- Bezpieczne dla materiałów produkty, które są niezwykle proste i szybkie w użyciu

Doradztwo i serwis


- Praktyczne wskazówki i indywidualne doradztwo w zakresie produktów
- Wsparcie w tworzeniu systemu zarządzania jakością
- Doksztalcanie, szkolenia zespołowe i doradztwo u klienta
- Fachowa wiedza przekazana przez wykwalifikowane konsultantki
- Liczne materiały serwisowe

Gwarancja maksymalnej jakości jest dla nas szczególnie ważną kwestią. To obietnica, na którą nacisk kładziemy szczególnie mocno w naszym dziale serwisowym. Poprzez naszą kompleksową ofertę serwisową udzielamy wsparcia szybko i przejrzystie.



Serwis Dürr Dental

duerrdental.com/service

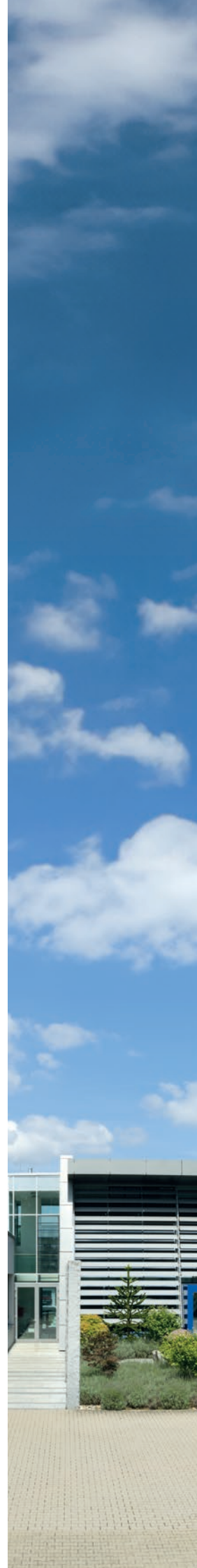

Dürr Dental – na nas możesz polegać!

Poza produktami z systemu higieny oferujemy kompleksowy pakiet usług, który wspiera personel gabinetu w codziennej pracy. Nasi doradcy są do dyspozycji bezpośrednio na miejscu. Nasz zespół serwisowy pomoże uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.

**Znajdź osobę
do kontaktu:**

duerrdental.com/contact



Spektrum działania i zastosowanie

Dezynfekcja	Czyszczenie	na liście VAH *	Na liście środków dezynfekujących IHO	sprawdzony wg norm UE	bakteriobójczy	prątkobójczy	drożdżakobójczy	grzybobójczy	w ograniczonym stopniu wirusobójczy	w ograniczonym stopniu wirusobójczy PLUS	Wirusobójczy	Stężenie / czas działania	Przydatność do użycia w dniach	Klasyfikacja
-------------	-------------	-----------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------------------------	--	--------------	---------------------------	--------------------------------	--------------

Higiena systemów ssących i obszarów specjalnych

Orotol plus Dezynfekcja systemu ssącego	■	■	■	■	■	■	■	■				2%/5 ³		Produkt medyczny
Orotol plus pH 7 Dezynfekcja systemu ssącego	■	■	■	■	■	■	■	■				2%/30 ³		Produkt medyczny
Orotol ultra Dezynfekcja systemu ssącego	■	■	■	■	■	■	■	■			■	1%/5 ³		Produkt medyczny
MD 520 Dezynfekcja wycisków	■	■	■	■	■	■	■	■			■	100%/5 ³	7	Produkt medyczny
MD 530 Usuwanie cementu/czyszczenie protez	■											100%		Produkt medyczny
MD 535 Środek do usuwania gipsu	■											100%		Produkt medyczny
MD 550 Środek do czyszczenia spluwaczek	■			■	■	■						100%/5 ³		Produkt medyczny
MD 555 cleaner Specjalny preparat czyszczący do systemów ssących	■											5%/30-120		Produkt medyczny
MD 555 cleaner organic Specjalny preparat czyszczący do systemów ssących	■											5%/30-120		Produkt medyczny

Higiena powierzchni FD

FD 300 Dezynfekcja powierzchni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%/2%/15/5 ³		Produkt medyczny
FD 312 Dezynfekcja powierzchni ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1%/15 ³		Produkt biobójczy
FD 312 wet wipes Dezynfekcja powierzchni ¹	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/15 ³		Produkt biobójczy
FD 322 Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/1 ³		Produkt medyczny
FD 322 premium wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 322 top wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 322 wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 top wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 forte Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 forte premium wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 333 forte wipes Szybka dezynfekcja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 350 Chusteczki do dezynfekcji	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 350 green Chusteczki do dezynfekcji	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 360 Czyszczenie i pielęgnacja sztucznej skóry	■											gotowy do użytku		Produkt medyczny
FD 366 sensitive Dezynfekcja delikatnych powierzchni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/1 ³		Produkt medyczny
FD 366 sensitive wipes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny
FD 366 sensitive top wipes Dezynfekcja delikatnych powierzchni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	gotowy do użytku/1 ³		Produkt medyczny

Higiena rąk HD

HD 420 plus Dezynfekcja rąk ^{1,2}	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/0,5/1,5 ²		Produkt biobójczy
HD 435 Emulsja do mycia	■											100%		Kosmetyk

Higiena instrumentów ID

ID 212 Dezynfekcja instrumentów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%/5 ³	7	Produkt medyczny
ID 212 forte plus Dezynfekcja instrumentów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%/5 ³	7	Produkt medyczny
ID 213 Dezynfekcja instrumentów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%/5 ³	14	Produkt medyczny
ID 215 Enzymatyczny preparat do czyszczenia instrumentów	■											1%/2%/30/15		Produkt medyczny
ID 220 Dezynfekcja wiertel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100%/1 ³	7	Produkt medyczny

* Obecność na liście VAH co najmniej roztworu preparatu

¹ Ostrożnie stosować środki dezynfekujące. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie (numer pozwolenia HD 420 plus: EU-0032838-0001 1-1; posiadacz pozwolenia: orochemie GmbH + Co. KG, Max-Planck-Straße 27, 70806 Kornwestheim, Niemcy). ² Higieniczna dezynfekcja rąk w przypadku widocznie czystych rąk: działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, mykobakteriobójcze/prątkobójcze, przeciwko wirusom otoczkowym (30 s); w ograniczonym stopniu wirusobójcze PLUS (90 s); chirurgiczna dezynfekcja rąk: działanie bakteriobójcze/drożdżakobójcze (90 s). ³ Środek bakteriobójczy/drożdżakobójczy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z informacjami o produkcie pod adresem www.duerrdental.com

Uwaga: dostępność produktów oraz ich dopuszczenie na rynek może różnić się w zależności od kraju.

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Kontakt w Polsce



**DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN